
LABOMED
ideas for vision

eVO 350
Lâmpada de fenda

Manual do usuário

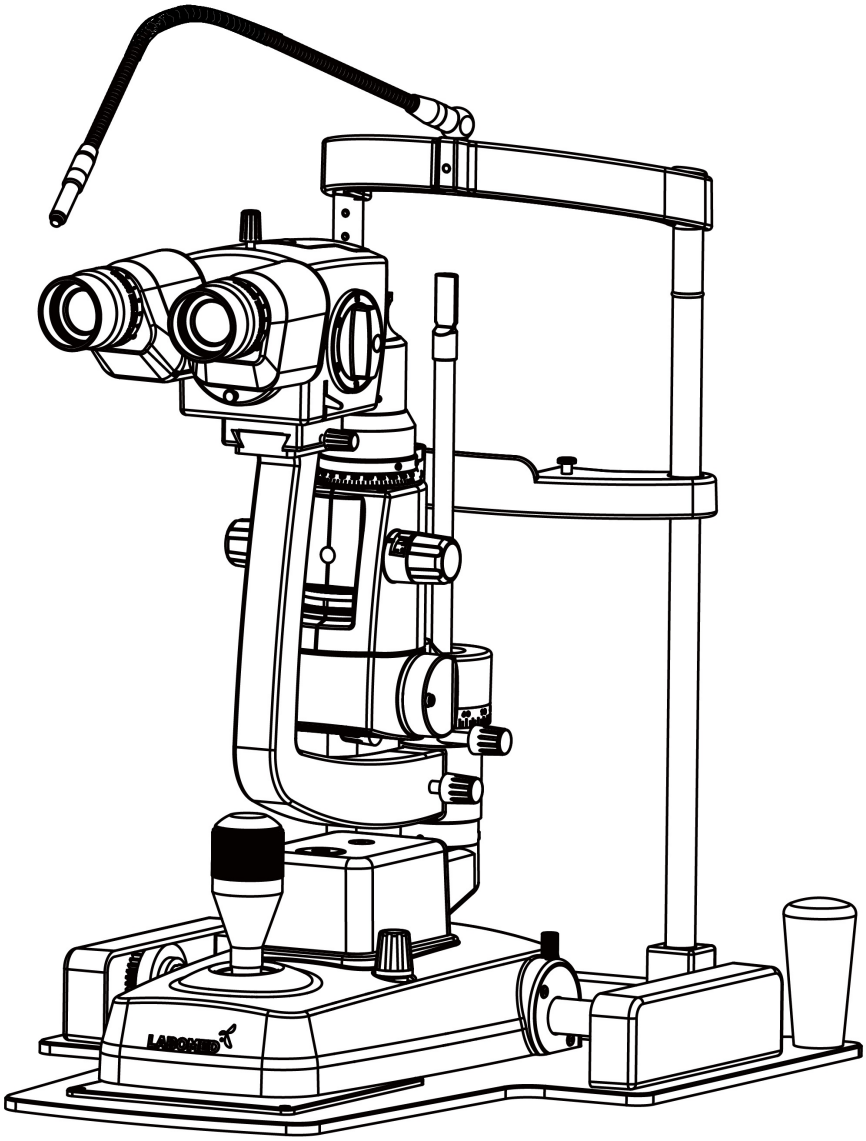

Peça nº 8126300-795
Edição 1.0
Impr.: fev. 2026

eVO 350 é uma marca registrada da Labotech Microscopes India Pvt. Ltd.

LABOMED é uma marca registrada da Labo America, Inc.

Todas as demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

As informações deste documento estavam corretas no momento da publicação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Labotech e a Labo America, Inc. reservam-se o direito de alterar o produto descrito neste manual sem aviso prévio e sem incorporar essas alterações aos produtos já vendidos.

Certificação ISO 9001/13485: os produtos LABOMED são projetados e fabricados sob um sistema de gestão da qualidade em conformidade com as normas ISO 9001/13485.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, de gravação ou outro, sem a autorização prévia por escrito da LABOTECH.

Cuidado: a lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos licenciados ou mediante prescrição destes. Somente sob prescrição (Rx only).

ÍNDICE

Advertências e cuidados 1
Informações dos símbolos 2
Introdução 3
Montagem (placa metálica e conjunto da mentoneira) 9
Montagem (plataforma de madeira e conjunto da mentoneira) 10
Montagem da base (fonte de alimentação externa) 11
Montagem da base (fonte de alimentação integrada) 12
Montagem (conjunto do microscópio), comum a todas as variantes 13
Instruções de uso 14-15
Operação 14
Comprimento da fenda 15
Seletor de filtros 15
Rotação da fenda 15
Limpeza, desinfecção e manutenção 16-18
Limpeza externa 16
Preparação do apoio de testa e da mentoneira 16
Limpeza da placa guia 16
Limpeza e desinfecção 16
Troca do LED 17
Troca do indicador luminoso da mentoneira 18
Solução de problemas 19
Configuração do sistema 20
Especificações 21-22
Tabelas de orientação 23-25
Garantia 26

ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS

A LABOMED não se responsabiliza pela segurança e pela confiabilidade deste instrumento quando:
- A montagem, desmontagem, reparo ou modificação for realizada por revendedores ou pessoas não autorizados.
- O instrumento não for utilizado de acordo com este manual do usuário.

Uma ADVERTÊNCIA é uma instrução que chama a atenção para o risco de lesões ou morte.



ADVERTÊNCIA: A LEI FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS E A REGULAMENTAÇÃO EUROPEIA EXIGEM QUE ESTE DISPOSITIVO SEJA ADQUIRIDO SOMENTE POR UM MÉDICO OU POR UMA PESSOA QUE AJA EM NOME DE UM MÉDICO.

ADVERTÊNCIA: UTILIZE ESTE INSTRUMENTO ESTRITAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL DO USUÁRIO. A SEGURANÇA DO OPERADOR E O DESEMPENHO DO INSTRUMENTO NÃO PODEM SER GARANTIDOS SE ELE FOR UTILIZADO DE MANEIRA NÃO ESPECIFICADA PELA LABOMED.

ADVERTÊNCIA: NÃO REPARE NEM FAÇA MANUTENÇÃO NESTE INSTRUMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. TODO REPARO OU MANUTENÇÃO DEVE SER REALIZADO POR PESSOAL EXPERIENTE OU POR REVENDEDORES TREINADOS PELA LABOMED; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER LESÕES GRAVES AO OPERADOR OU AO PACIENTE.

ADVERTÊNCIA: NÃO SÃO PERMITIDAS MODIFICAÇÕES NESTE INSTRUMENTO. TODA MODIFICAÇÃO DESTA UNIDADE DEVE SER AUTORIZADA PELA LABOMED; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER LESÕES GRAVES AO OPERADOR OU AO PACIENTE.

ADVERTÊNCIA: SE ESTE INSTRUMENTO FOR MODIFICADO, DEVEM SER REALIZADOS INSPEÇÕES E TESTES ADEQUADOS PARA GARANTIR QUE ELE CONTINUE SEGURO PARA USO.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ESTE EQUIPAMENTO SÓ DEVE SER CONECTADO A UMA REDE DE ALIMENTAÇÃO COM ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER DANOS AO INSTRUMENTO OU LESÕES AO OPERADOR OU AO PACIENTE.

ADVERTÊNCIA: CERTIFIQUE-SE DE QUE A TENSÃO APLICADA À UNIDADE SEJA A MESMA INDICADA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER DANOS À UNIDADE.

ADVERTÊNCIA: ESTE INSTRUMENTO DEVE SER CONECTADO A UMA TOMADA COM ATERRAMENTO. NÃO REMOVA NEM ANULE A CONEXÃO DE ATERRAMENTO DO CONECTOR DE ENTRADA DE ENERGIA NEM DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER DANOS AO INSTRUMENTO OU LESÕES AO OPERADOR OU AO PACIENTE.

ADVERTÊNCIA: O EQUIPAMENTO OU SISTEMA NÃO DEVE SER UTILIZADO ADJACENTE A OUTROS EQUIPAMENTOS NEM EMPILHADO COM ELES. SE FOR NECESSÁRIO O USO ADJACENTE OU EMPILHADO, O EQUIPAMENTO OU SISTEMA DEVE SER OBSERVADO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO NORMAL NA CONFIGURAÇÃO EM QUE SERÁ UTILIZADO.

ADVERTÊNCIA: ESTE INSTRUMENTO NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE MISTURAS ANESTÉSICAS INFLAMÁVEIS COM OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.

ADVERTÊNCIA: COMO A EXPOSIÇÃO PROLONGADA À LUZ INTENSA PODE DANIFICAR A RETINA, O USO DO DISPOSITIVO PARA EXAME OCULAR NÃO DEVE SER PROLONGADO DESNECESSARIAMENTE, E O AJUSTE DE BRILHO NÃO DEVE EXCEDER O NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DAS ESTRUTURAS-ALVO. ESTE DISPOSITIVO É FORNECIDO COM FILTROS QUE ELIMINAM A RADIAÇÃO UV (< 400 NM) E, SEMPRE QUE POSSÍVEL, FILTROS PARA LUZ AZUL DE COMPRIMENTO DE ONDA CURTO (< 420 NM).

ADVERTÊNCIA: O USO DE ACESSÓRIOS OU CABOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS, COM EXCEÇÃO DAQUELES VENDIDOS PELO FABRICANTE COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS, PODE RESULTAR EM AUMENTO DAS EMISSÕES OU REDUÇÃO DA IMUNIDADE DO EQUIPAMENTO OU SISTEMA.

ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS (continuação)

Um CUIDADO é uma instrução que chama a atenção para o risco de danos ao produto.

CUIDADO: OS CIRCUITOS INTERNOS DO INSTRUMENTO CONTÊM DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À ELETRICIDADE ESTÁTICA (ESD) QUE PODEM SER AFETADOS POR CARGAS ESTÁTICAS PRODUZIDAS PELO CORPO HUMANO. NÃO REMOVA AS TAMPAS SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ADEQUADAS CONTRA DESCARGAS ELETROSTÁTICAS.

CUIDADO: NÃO UTILIZE SOLVENTES NEM SOLUÇÕES DE LIMPEZA FORTES EM NENHUMA PARTE DESTE INSTRUMENTO, POIS ISSO PODE DANIFICAR A UNIDADE. CONSULTE A SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA INSTRUÇÕES DETALHADAS DE LIMPEZA.

CUIDADO: OS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS EXIGEM PRECAUÇÕES ESPECIAIS QUANTO À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) E DEVEM SER INSTALADOS E MANTIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DE EMC FORNECIDAS NOS DOCUMENTOS ACOMPANHANTES.

CUIDADO: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR RF PORTÁTEIS E MÓVEIS PODEM AFETAR OS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS.

CUIDADO: NÃO UTILIZE ESTE INSTRUMENTO PRÓXIMO A EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS QUE EMITEM ALTA FREQUÊNCIA.

CUIDADO: ESTE INSTRUMENTO NÃO SE DESTINA A SER CONECTADO A EQUIPAMENTOS FORA DO CONTROLE DA LABOMED; QUALQUER EQUIPAMENTO DESSE TIPO DEVE SER ENSAIADO DE ACORDO COM AS NORMAS IEC OU ISO APLICÁVEIS.

CUIDADO: O PAPEL DA MENTONEIRA É DE USO ÚNICO. SUBSTITUA-O PARA CADA PACIENTE.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os seguintes símbolos aparecem no instrumento:


Símbolo de cuidado que indica instruções importantes de operação e manutenção incluídas neste guia do usuário.


Parte aplicada tipo B


Corrente alternada


Aterramento de proteção


Conexão LIGA/DESLIGA



Fabricante


Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos


Conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE (MDR) 2017/745


Consulte os documentos acompanhantes.



Representante autorizado na Comunidade Europeia.


Conteúdo frágil: manusear com cuidado


Manter seco: proteger da chuva.


Este lado para cima: indica a posição vertical correta da embalagem.



A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição destes.



Dispositivo médico



Representante autorizado na Europa



Nº de série (AA: ano, MM: mês, XXXX: nº de série)



Nº do modelo

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra da lâmpada de fenda eVO 350.

Este manual do usuário é um manual de treinamento e de referência para a operação e a manutenção do instrumento. Leia-o atentamente antes do uso e siga as instruções para garantir o desempenho ideal do seu novo instrumento. Este instrumento deve ser operado por profissionais de saúde ocular devidamente treinados, como oftalmologistas, optometristas, ópticos e técnicos em saúde ocular.

Guarde este manual para consultas futuras e compartilhe-o com outros usuários. Cópias adicionais podem ser obtidas com o seu revendedor autorizado LABOMED ou com o Departamento de Atendimento ao Cliente da LABOMED:

Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com

☞ **Todo incidente grave com este dispositivo deve ser notificado à Labotech Microscopes India Pvt. Ltd. ou à autoridade sanitária do seu país.**

INDICAÇÕES DE USO

A lâmpada de fenda eVO 350 é um biomicroscópio com lâmpada de fenda alimentado por CA, destinado ao exame do segmento anterior do olho, do epitélio corneano à cápsula posterior. É utilizada como auxílio no diagnóstico de doenças ou traumas que afetam as propriedades estruturais do segmento anterior do olho.

CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma.

CONFIGURAÇÕES

Microscópio	Código
eVO 350 LED PLATAFORMA METÁLICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)	8126301
eVO 350 LED PLATAFORMA DE MADEIRA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)	8126303
eVO 350 LED PLATAFORMA METÁLICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA)	8126318
eVO 350 LED PLATAFORMA DE MADEIRA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA)	8126336

eVO 350 LED PLATAFORMA METÁLICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


1. Interruptor liga/desliga
2. Controle de nível de iluminação
3. Placa guia do joystick
4. Joystick para movimento horizontal e vertical
5. Porta de acesso à lâmpada
6. Seletor de filtros
7. Seletor de comprimento da fenda
8. Suporte do protetor de respiração
9. Oculares
10. Anel de foco
11. Luz de fixação
12. Seletor de ampliação
13. Trava do microscópio
14. Escala de rotação
15. Botão de largura/rotação da fenda
16. Trava do braço de iluminação
17. Trava do braço do microscópio
18. Trava da base
19. Tampa do trilho guia
20. Roletes dentados
21. Conjunto da mentoneira
22. Conjunto da fonte de alimentação
23. Tampo da mesa
24. Alças do paciente
25. Botão do filtro amarelo (filtro Wratten)
26. Trocador de aumento
27. CMO (objetiva principal comum)

eVO 350: CONTEÚDO

1. Lâmpada de fenda eVO 350 LED (8126301)

ACESSÓRIOS

1. Haste de foco (8124300-801)
2. Chave sextavada de 3 mm (LK-003)
3. Chave sextavada de 4 mm (LK-004)
4. Chave sextavada de 5 mm (LK-005)
5. Capa contra poeira (PKG-107)
6. Tampas da cremalheira (8124100-206)
7. Fusíveis de reposição (8124900-900)
8. Papel para mentoneira, 1 pacote (8126000-786)

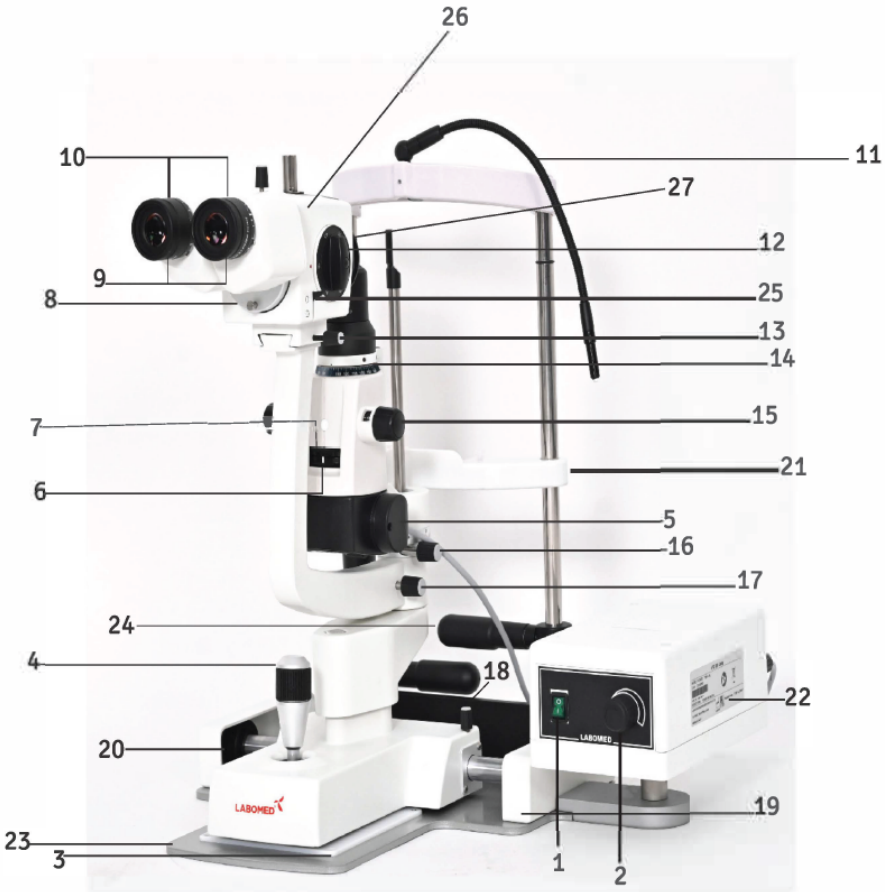

eVO 350 LED PLATAFORMA DE MADEIRA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


1. Interruptor liga/desliga
2. Controle de nível de iluminação
3. Placa guia do joystick
4. Joystick para movimento horizontal e vertical
5. Porta de acesso à lâmpada
6. Seletor de filtros
7. Seletor de comprimento da fenda
8. Suporte do protetor de respiração
9. Oculares
10. Anel de foco
11. Luz de fixação
12. Seletor de ampliação
13. Trava do microscópio
14. Escala de rotação
15. Botão de largura/rotação da fenda
16. Trava do braço de iluminação
17. Trava do braço do microscópio
18. Trava da base
19. Tampa do trilho guia
20. Roletes dentados
21. Conjunto da mentoneira
22. Conjunto da fonte de alimentação
23. Tampo da mesa
24. Alças do paciente
25. Botão do filtro amarelo (filtro Wratten)
26. Trocador de aumento
27. CMO (objetiva principal comum)

eVO 350: CONTEÚDO

1. Lâmpada de fenda eVO 350 HL (8126303)

ACESSÓRIOS

1. Haste de foco (8124300-801)
2. Chave sextavada de 3 mm (LK-003)
3. Chave sextavada de 4 mm (LK-004)
4. Chave sextavada de 5 mm (LK-005)
5. Capa contra poeira (PKG-107)
6. Tampas da cremalheira (8124100-206)
7. Fusíveis de reposição (8124900-900)
8. Papel para mentoneira, 1 pacote (8126000-786)

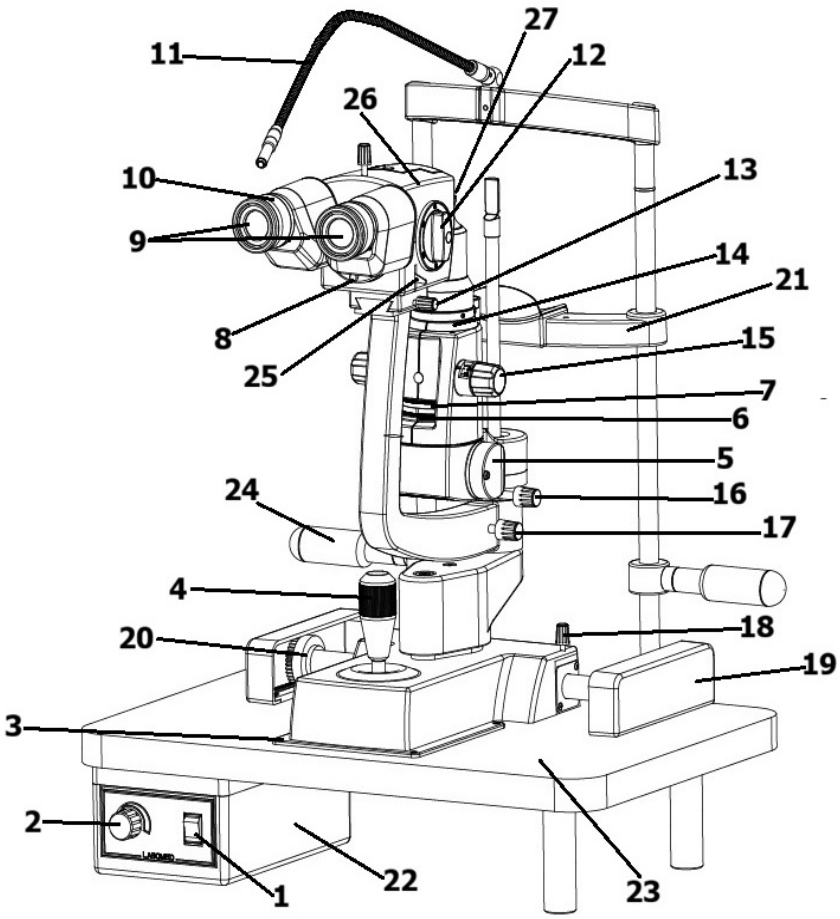

eVO 350 LED PLATAFORMA METÁLICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA)

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

1. Potenciômetro liga/desliga
2. Placa guia do joystick
3. Joystick para movimento horizontal e vertical
4. Porta de acesso à lâmpada
5. Seletor de filtros
6. Seletor de comprimento da fenda
7. Suporte do protetor de respiração
8. Oculares
9. Anel de foco
10. Luz de fixação
11. Seletor de ampliação
12. Trava do microscópio
13. Escala de rotação
14. Botão de largura/rotação da fenda
15. Trava do braço de iluminação
16. Trava do braço do microscópio
17. Trava da base
18. Tampa do trilho guia
19. Roletes dentados
20. Conjunto da mentoneira
21. Tampo da mesa
22. Alças do paciente
23. Botão do filtro amarelo (filtro Wratten)
24. Trocador de aumento
25. Fonte de alimentação


eVO 350: CONTEÚDO

1. Lâmpada de fenda eVO 350 LED (8126318)

ACESSÓRIOS

1. Haste de foco (8124300-801)
2. Chave sextavada de 3 mm (LK-003)
3. Chave sextavada de 4 mm (LK-004)
4. Chave sextavada de 5 mm (LK-005)
5. Capa contra poeira (PKG-107)
6. Tampas da cremalheira (8124100-206)
7. Fusíveis de reposição (8124900-900)
8. Papel para mentoneira, 1 pacote (8126000-786)



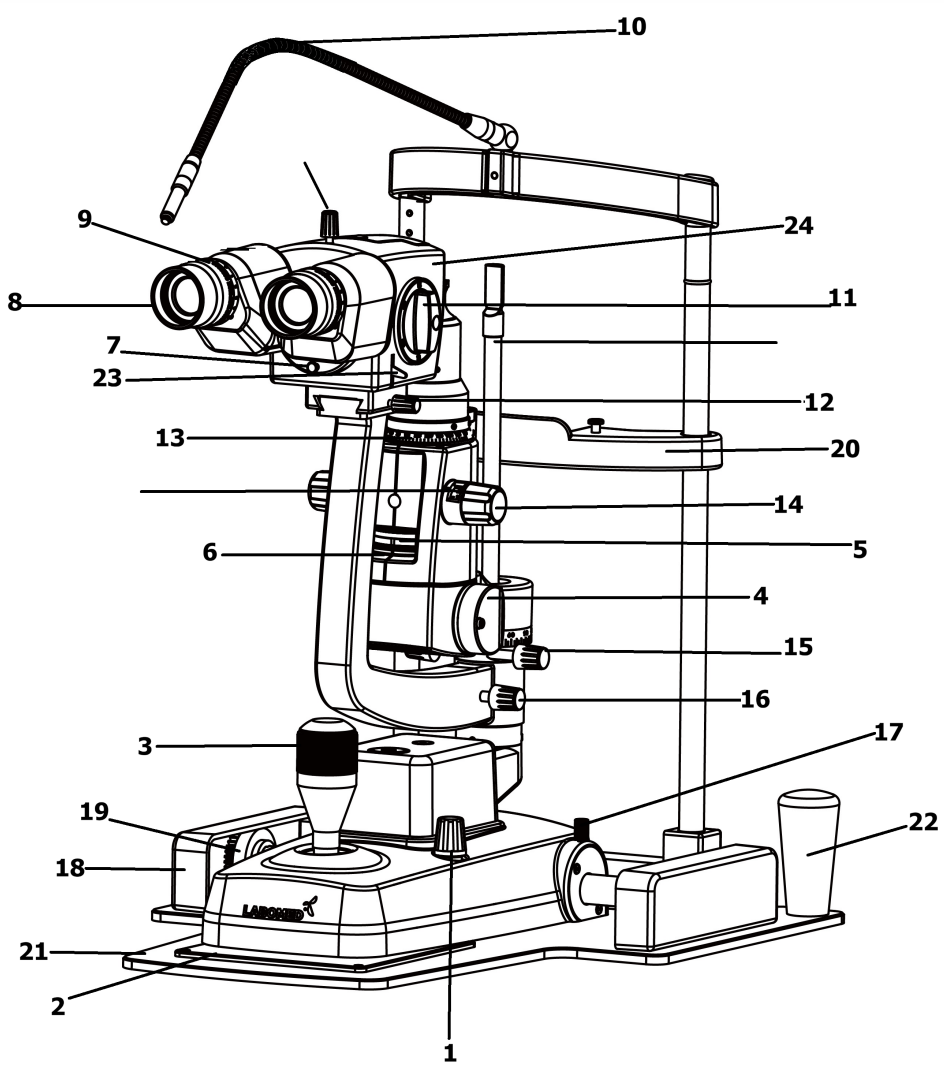

eVO 350 LED PLATAFORMA DE MADEIRA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA)

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

1. Potenciômetro liga/desliga
2. Placa guia do joystick
3. Joystick para movimento horizontal e vertical
4. Porta de acesso à lâmpada
5. Seletor de filtros
6. Seletor de comprimento da fenda
7. Suporte do protetor de respiração
8. Oculares
9. Anel de foco
10. Luz de fixação
11. Seletor de ampliação
12. Trava do microscópio
13. Escala de rotação
14. Botão de largura/rotação da fenda
15. Trava do braço de iluminação
16. Trava do braço do microscópio
17. Trava da base
18. Tampa do trilho guia
19. Roletes dentados
20. Conjunto da mentoneira
21. Tampo da mesa
22. Alças do paciente
23. Botão do filtro amarelo (filtro Wratten)
24. Trocador de aumento
25. Fonte de alimentação


eVO 350: CONTEÚDO

1. Lâmpada de fenda eVO 350 LED (8126318)

ACESSÓRIOS

1. Haste de foco (8124300-801)
2. Chave sextavada de 3 mm (LK-003)
3. Chave sextavada de 4 mm (LK-004)
4. Chave sextavada de 5 mm (LK-005)
5. Capa contra poeira (PKG-107)
6. Tampas da cremalheira (8124100-206)
7. Fusíveis de reposição (8124900-900)
8. Papel para mentoneira, 1 pacote (8126000-786)



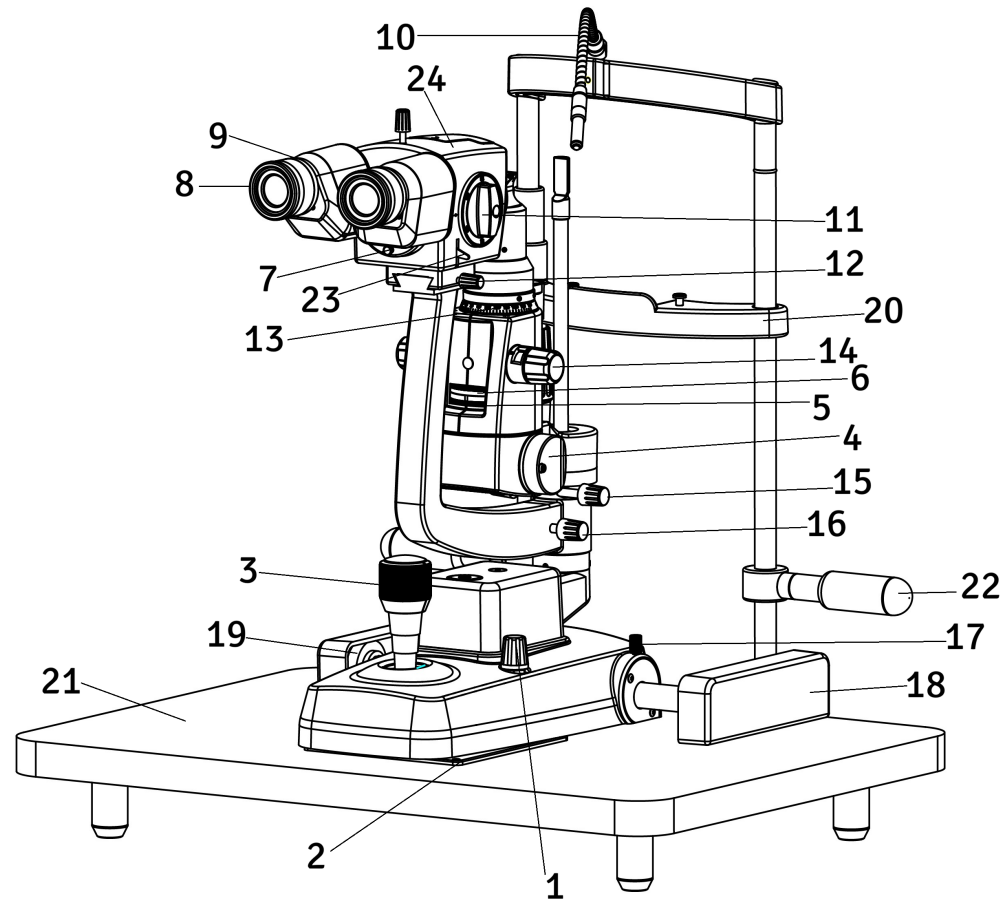

MONTAGEM (PLACA METÁLICA E CONJUNTO DA MENTONEIRA)

DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO

1. Abra a caixa externa de transporte e retire as três (3) caixas internas.

2. Retire o manual do usuário e siga-o para instalar a lâmpada de fenda.

3. Abra a caixa marcada “Platform Assembly” (conjunto da plataforma) e retire o tampo da mesa e o suporte da fonte de alimentação (indicado como “A” na fig. 1).

4. Abra a caixa marcada “Chin Rest Assembly” (conjunto da mentoneira) e retire o conjunto completo da mentoneira, como mostrado na fig. 2.

5. Fixe o conjunto da mentoneira ao tampo da mesa com seis (6) parafusos Allen M3, usando uma chave Allen de 2,5 mm. Veja a fig. 3.



Figura 1. Tampo e suporte da fonte



Figura 2. Conjunto da mentoneira



Figura 3. Parafusos de fixação da mentoneira

MONTAGEM (PLATAFORMA DE MADEIRA E CONJUNTO DA MENTONEIRA)

Desembalagem e instalação

1. Abra a caixa externa de transporte e retire as três (3) caixas internas.
2. Retire o manual do usuário e leia-o.
3. Abra a caixa que contém o tampo da mesa e a eletrônica. Veja a figura 4.
4. Retire o tampo da mesa da caixa, instale-o sobre o suporte do instrumento e fixe-o conforme indicado no guia do usuário do suporte.
5. Abra a caixa do conjunto da mentoneira e retire-o. Veja a figura 5.
6. Com a chave sextavada de 3 mm, conecte o fio terra da fonte de alimentação ao conjunto da mentoneira com o parafuso de aterramento fornecido (torque de 7,8 N·m). Veja a figura 6.
7. Com a chave sextavada de 5 mm, retire os dois parafusos da parte inferior do tampo da mesa e fixe com eles o conjunto da mentoneira ao tampo. Veja a figura 8.
8. Com a chave sextavada de 4 mm, ajuste as alças do paciente afrouxando os parafusos Allen de cabeça cilíndrica que as fixam às colunas da mentoneira. Deslize as alças para cima ou para baixo até a altura desejada e fixe-as apertando os parafusos Allen. Veja a figura 7.
9. Conecte o fio da luz de fixação do conjunto da mentoneira ao conector na parte traseira do conjunto da fonte de alimentação. Veja a figura 9.

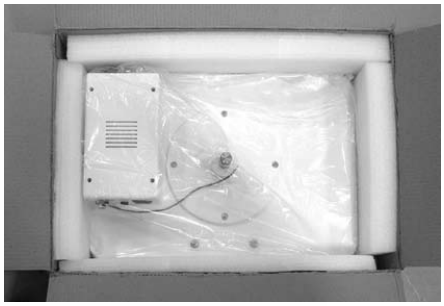


Figura 4. Tampo da mesa e eletrônica

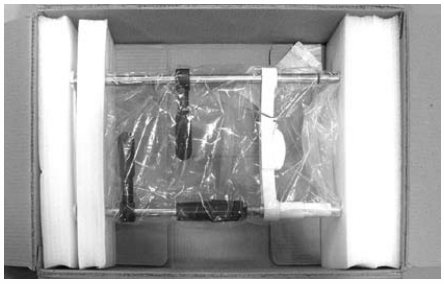


Figura 5. Conjunto da mentoneira



Figura 6. Aterramento da mentoneira

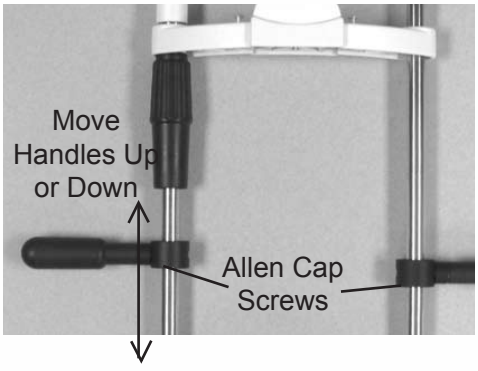


Figura 7. Altura das alças

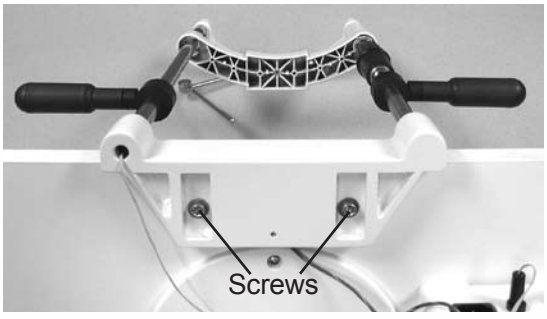


Figura 8. Parafusos de fixação da mentoneira

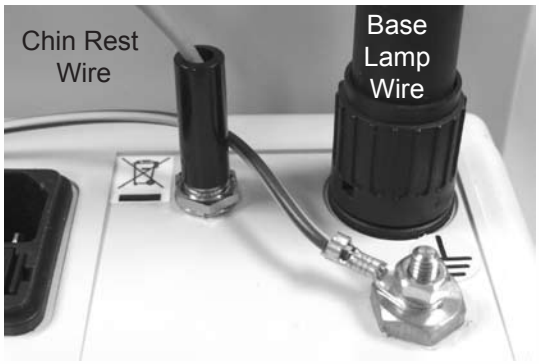


Figura 9. Conexões

MONTAGEM DA BASE (FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)

DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO (cont.)

1. Abra a caixa marcada “Microscope Assembly” (conjunto do microscópio). Retire o conjunto do microscópio, o conjunto da lâmpada de fenda, a fonte de alimentação e os acessórios. Veja a figura 5.

2. Instale o conjunto da lâmpada de fenda sobre os trilhos do tampo da mesa e deslize as tampas dos trilhos guia em volta dos trilhos. Veja a figura 6.

3. Encaixe a fonte de alimentação no tampo da mesa, empurrando-a para dentro do furo indicado como (C). Veja a figura 7.

4. Conecte o fio terra à fonte de alimentação com a chave Allen de 3 mm. Veja a fig. 8.

5. Conecte o conector do fio da lâmpada da base à parte traseira do conjunto da fonte de alimentação. Veja a fig. 8.

6. Conecte o conector da luz de fixação da mentoneira ao conjunto da fonte de alimentação. Veja a figura 8.

7. Com a chave sextavada de 4 mm, ajuste as alças do paciente afrouxando os parafusos Allen de cabeça cilíndrica que as fixam às colunas da mentoneira. Deslize as alças para cima ou para baixo até a altura desejada e fixe-as apertando os parafusos Allen. Veja a fig. 9.

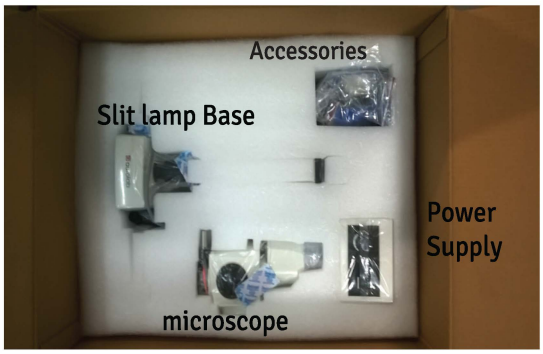


Figura 5. Microscópio, base, fonte e acessórios

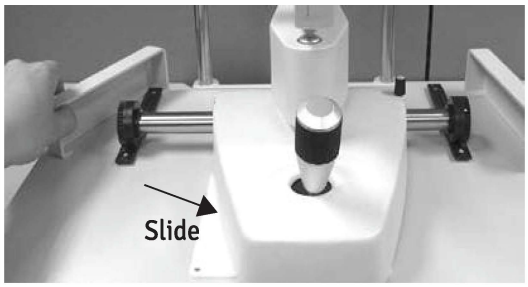


Figure- 6 Install Base

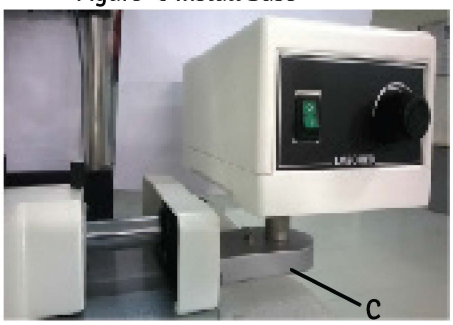


Figura 7. Montagem da fonte de alimentação no suporte



Figura 8. Conexões

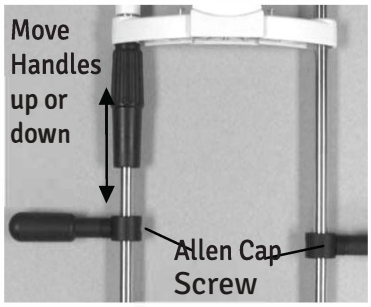


Figura 9. Altura das alças

MONTAGEM DA BASE (FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA)

DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO (cont.)

1. Abra a caixa marcada “Microscope Assembly” (conjunto do microscópio). Retire o conjunto do microscópio, o conjunto da lâmpada de fenda, a fonte de alimentação e os acessórios. Veja a figura 5.

2. Instale o conjunto da base sobre os trilhos do tampo da mesa e deslize as tampas dos trilhos guia em volta dos trilhos. Veja a figura 6.

3. Monte o conjunto do braço móvel e de iluminação sobre a base com o parafuso Allen M6, como mostrado na fig. 7.
4. Conecte o adaptador de energia (12 V CC) à entrada (F) na parte traseira da base da lâmpada de fenda. Veja a fig. 7.
5. Conecte o conector cinza do fio da lâmpada à entrada (G) na parte traseira da base da lâmpada de fenda. Veja a fig. 7a.
6. Conecte o conector da luz de fixação da mentoneira à entrada na parte traseira da base da lâmpada de fenda. Veja a fig. 8.

7. Para ligar o dispositivo, gire o botão (B) no sentido horário. Para aumentar a intensidade da iluminação, continue girando o botão (B) no sentido horário.

8. Para desligar o dispositivo, gire o botão (B) no sentido anti-horário.

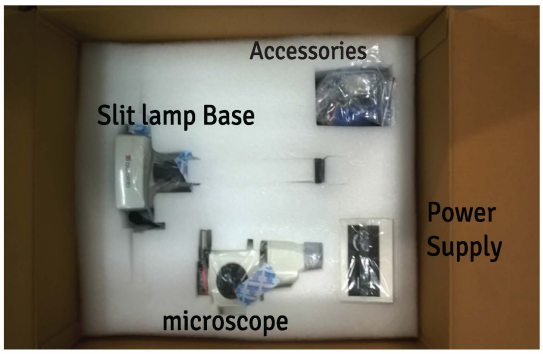


Figura 5. Microscópio, base, fonte e acessórios

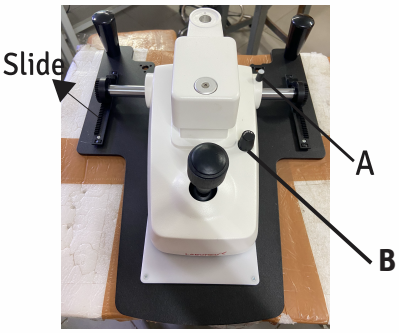


Fig. 6

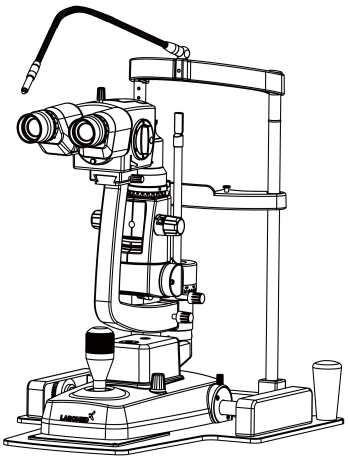


Fig. 7



Fig. 8. Conexão da luz de fixação

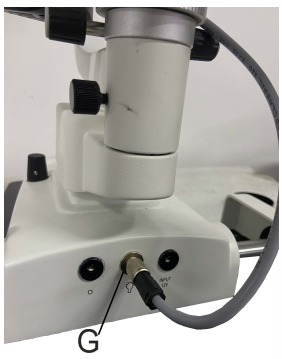


Fig. 7a. Conexão do fio da lâmpada

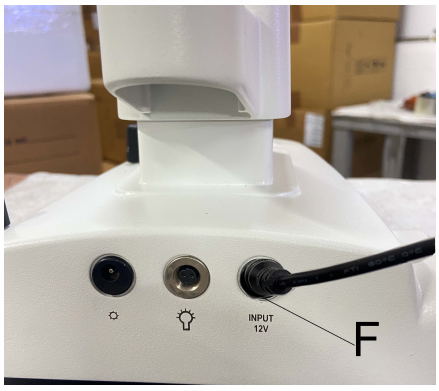


Fig. 7. Conexão do adaptador

MONTAGEM (CONJUNTO DO MICROSCÓPIO), COMUM A TODAS AS VARIANTES

DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO (cont.)

13. Instale o conjunto do microscópio na parte superior do braço, deslizando-o até encostar no batente. Em seguida, aperte o botão de trava do lado direito do conjunto do microscópio. Veja a figura 9.

Nota: Não ajuste o botão de batente do microscópio situado atrás da base do microscópio; alterar a distância do vértice desalinha o foco e exige a recalibração do conjunto da lâmpada de fenda.

14. Retire os acessórios e guarde-os em local adequado para que estejam disponíveis quando necessário. Veja a figura 10.



Figura 9. Instalação do microscópio

CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO

ADVERTÊNCIA: DISPONHA OS CABOS DOS ACESSÓRIOS DE MODO QUE NÃO REPRESENTEM RISCO DE TROPEÇO PARA O EXAMINADOR NEM PERIGO PARA O PACIENTE.

ADVERTÊNCIA: POSICIONE ESTE INSTRUMENTO DE MODO QUE O DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO (PLUGUE) SEJA FÁCIL DE OPERAR.



Figura 10. Acessórios

1. Com a unidade posicionada em local seguro, aplique a tensão de entrada correta ao instrumento usando o adaptador de energia que acompanha a caixa.

NOTA: A entrada de energia fica na parte traseira da base da lâmpada de fenda.

2. Conecte a lâmpada de fenda ao adaptador de 12 V CC fornecido. Gire o reostato (R) da base da lâmpada de fenda para acender a lâmpada. Veja a fig. 11.

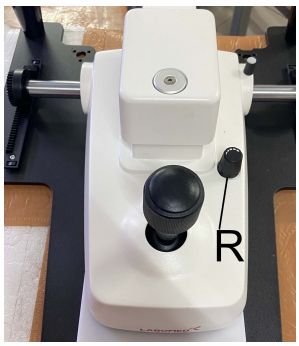


Fig. 11. Botão de intensidade da luz

Montagem do protetor de respiração

1. Retire as oculares (S). Veja a fig. 11a.

2. Segure o protetor de respiração (T) na vertical, alinhe o seu recorte em volta dos tubos das oculares e recoloque as oculares. Veja a fig. 11a.

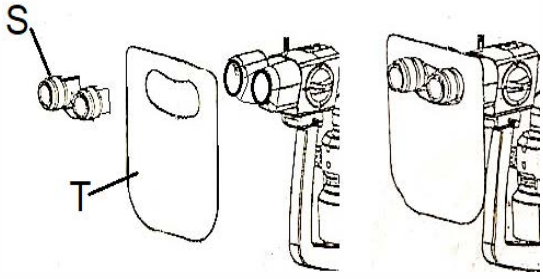


Fig. 11a. Montagem do protetor de respiração

INSTRUÇÕES DE USO

OPERAÇÃO

1. Ligue o equipamento com o interruptor liga/desliga na parte frontal do conjunto da fonte de alimentação. Ajuste o brilho girando o botão de nível de iluminação.

NOTA: A posição máxima é apenas para uso intermitente. O uso contínuo reduz a vida útil da lâmpada ou do LED.

2. Insira a haste de foco na coluna pivô do corpo do instrumento para fazer os ajustes aproximados da distância interpupilar e do foco.
3. Direcione a luz sobre a superfície plana da haste de foco e ajuste a distância interpupilar e o foco das oculares de acordo com o operador. Veja a figura 12.
4. Com os botões de largura da fenda, ajuste a fenda projetada de modo que a fenda mais fina apareça sobre a haste de foco. Veja as figuras 12 e 15.

NOTA: A linha mais fina permite maior precisão.

5. Retire a haste de foco.
6. Para posicionar o paciente, ajuste a altura da mentoneira girando a manopla de elevação na coluna do conjunto da mentoneira até que o canto do olho do paciente fique alinhado com a marca de canto na coluna da mentoneira. Veja a figura 13.
7. Ajuste a elevação do microscópio girando o joystick enquanto observa a imagem da fenda através do conjunto do microscópio, até que a fenda fique centralizada na córnea do paciente. Veja a figura 14.
8. Segurando o joystick firmemente, levemente inclinado em direção ao paciente, mova a lâmpada de fenda até que a fenda apareça nítida sobre a córnea.

NOTA: Verifique a olho nu a precisão deste ajuste aproximado. O ajuste fino é feito observando a fenda através do microscópio.

9. Incline o joystick, agora segurado levemente pela extremidade superior, até que a fenda apareça nítida na profundidade do olho a ser observada.
10. O movimento horizontal da base pode ser travado apertando o parafuso de trava da base. Veja a figura 14.

NOTA: Trave a base sempre que a lâmpada não estiver em uso.

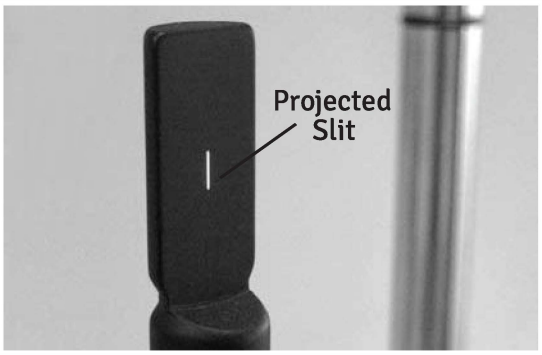


Figura 12. Foco da fenda



Figura 13. Altura do paciente



Figura 14. Ajuste da altura

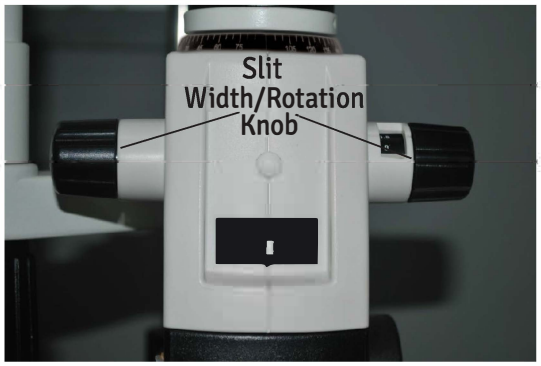


Figura 15. Ajuste da largura da fenda

INSTRUÇÕES DE USO (cont.)

OPERAÇÃO (continuação)

11. Ajuste a largura da fenda girando o botão de largura/rotação da fenda em qualquer um dos lados do instrumento. Veja a figura 15.

12. O ângulo entre o sistema de iluminação e o microscópio pode ser variado de 0° a 90° para a esquerda ou para a direita. Veja a figura 16.

13. O ângulo de iluminação é indicado na escala de ângulo de iluminação do braço da lâmpada de fenda. Veja a figura 17.

14. Altere a ampliação girando o seletor de ampliação do conjunto do microscópio. Veja a figura 16.

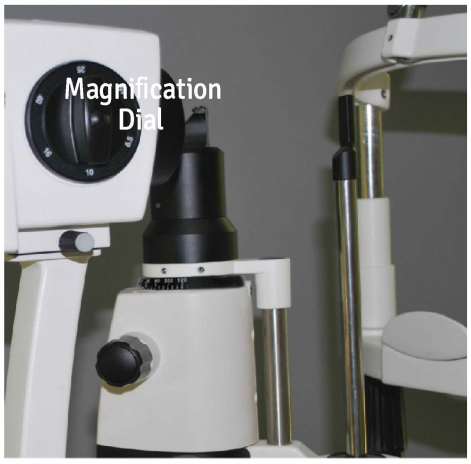


Figura 16. Ângulo de iluminação



Figura 17. Escala do ângulo de iluminação

COMPRIMENTO DA FENDA

Ajuste o comprimento da fenda com o seletor de comprimento. O seletor tem cinco posições: 0,6; 5,8; 9 e 13,5 mm de diâmetro, e contínuo
de 1,5 a 12,0 mm. As posições se encaixam no lugar. Veja a figura 18.

FILTROS

O seletor de filtros tem quatro posições com encaixe, codificadas por cores para indicar o filtro ativo. Veja a figura 18. As cores são:

Ponto azul = azul cobalto

Ponto branco = aberto

Ponto vermelho = absorvedor de calor

Ponto verde = livre de vermelho



Figura 18. Filtros e comprimento

FILTRO AMARELO (FILTRO WRATTEN)

O filtro amarelo da lâmpada de fenda é ideal para detectar colorações sutis causadas pela interação de soluções com lentes de contato de hidrogel.
O filtro pode ser usado para a detecção precoce da coloração corneana puntiforme causada pela interação entre lente de contato e solução, para a detecção precoce da correlação entre sintomas do paciente e sinais da síndrome do olho seco e para melhor visualização dos padrões de fluoresceína de lentes RGP. Veja a figura 18a.



Figura 18a. Botão do filtro amarelo

ROTAÇÃO DA FENDA

Para girar a fenda, segure o botão de largura/rotação da fenda e gire o corpo da fenda para a esquerda ou para a direita. O grau de rotação é indicado na escala de rotação acima do corpo da fenda. Veja a figura 19.

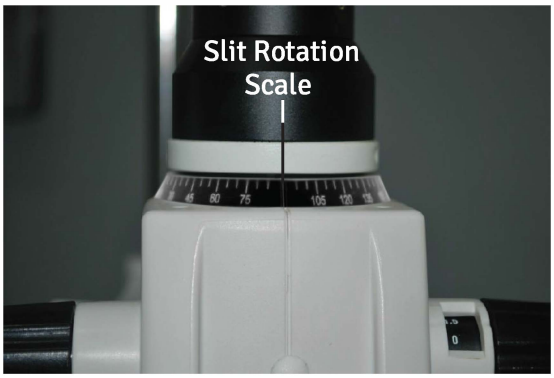


Figura 19. Escala de rotação

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO

ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. SEMPRE DESCONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA E DO INSTRUMENTO ANTES DE REALIZAR QUALQUER UM DOS PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO A SEGUIR.

LIMPEZA EXTERNA

Limpe as superfícies externas deste instrumento com um pano limpo e macio umedecido em uma solução de detergente neutro para louça (filtrada abaixo de 5 mícrons). Veja a figura 20.



Figura 20. Limpeza da unidade

APOIO DE TESTA E MENTONEIRA

Por razões de higiene, limpe o apoio de testa com um lenço umedecido em álcool e troque o papel da mentoneira após cada paciente.

LIMPEZA DA PLACA GUIA

Se a placa guia estiver suja, a base da lâmpada de fenda pode se mover com dificuldade. Limpe a placa guia com um pano macio levemente umedecido em uma solução de água e sabão neutro.

REQUISITOS DO AMBIENTE DE USO

- Mantenha o ambiente de operação indicado na seção de especificações.
- Não utilize este instrumento em ambiente corrosivo, para evitar ferrugem.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Os seguintes desinfetantes são recomendados para limpeza e desinfecção.

1. Água sanitária comum (hipoclorito de sódio a 5%), diluída a 5.000 ppm (10 partes de água para 1 parte de água sanitária).
2. Álcool isopropílico a 70%.

Procedimento:

- Pegue um pano de musselina.
- Umedeça-o até ficar molhado ao toque.
- Desinfete e limpe a superfície suavemente.

Nota: 1. Use máscara e luvas ao limpar e desinfetar.
2. O pano de musselina não deve estar pingando, para evitar infiltração e ferrugem em peças móveis ou sem revestimento.
3. O álcool é inflamável; use-o como desinfetante de superfícies somente em locais bem ventilados.

TROCA DO LED

ADVERTÊNCIA: NUNCA RETIRE UM LED QUE TENHA SIDO USADO RECENTEMENTE, POIS ELE PODE ESTAR MUITO QUENTE. ESPERE ATÉ QUE ESFRIE.

ADVERTÊNCIA: NUNCA TOQUE UM LED COM AS MÃOS DESPROTEGIDAS, POIS AS IMPRESSÕES DIGITAIS REDUZEM A VIDA ÚTIL DO LED.

1. Desconecte a alimentação do instrumento.

2. Retire o anel de retenção com um alicate para anéis de retenção, indicado como “A”. Veja a figura 24.

3. Levante com cuidado o alojamento da iluminação.

4. Retire a tampa da lâmpada desparafusando os quatro parafusos com uma chave de fenda, indicados como “B”. Veja a figura 25.

5. Desparafuse os dois parafusos Allen M3 com uma chave Allen de 2,5 mm, indicados como “C”, para retirar o dissipador de calor. Veja a figura 26.

6. Separe o LED do dissipador de calor retirando os dois parafusos indicados como “D”. Veja a figura 27.

7. Coloque o LED novo e remonte na ordem inversa.



Figura 24

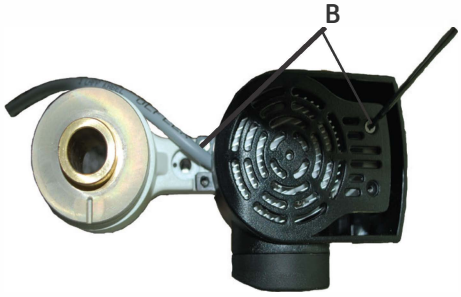


Figura 25



Figura 26

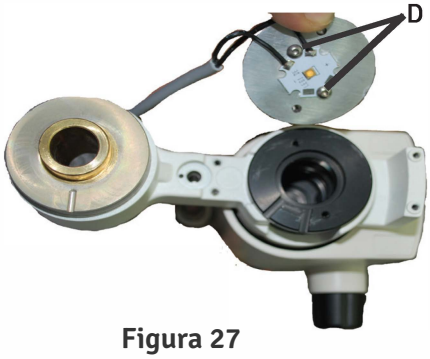


Figura 27

Troca do indicador da mentoneira

1. Desrosqueie a tampa do LED. Veja a fig. 28.

2. Retire o LED com defeito e coloque o LED novo (veja a fig. 28a). Rosqueie novamente a tampa do LED.

NOTA: Se o LED novo não acender ao ligar o equipamento, retire-o e recoloque-o com a polaridade invertida.



Figura 28. LED de fixação

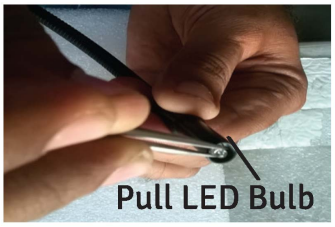


Figura 28a. LED de fixação

SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS (SE APLICÁVEL)

Substitua os fusíveis do módulo de entrada de energia pelos fusíveis indicados na seção **Especificações** deste manual.

1. Desconecte a alimentação do instrumento.
2. Pressione para baixo a lingueta superior no centro do módulo de entrada de energia para liberar o porta-fusível e puxe-o com cuidado pelas suas duas pequenas linguetas. Veja as figuras 30 e 31.
3. Abra a tampa do porta-fusível puxando-a para baixo. Veja a figura 31.

NOTA: Os fusíveis saltam para fora quando a tampa é aberta, o que facilita a remoção.

4. Coloque no porta-fusível os fusíveis novos indicados na seção de especificações deste manual.
5. Recoloque o porta-fusível: feche a tampa e empurre o porta-fusível até que se encaixe no lugar.

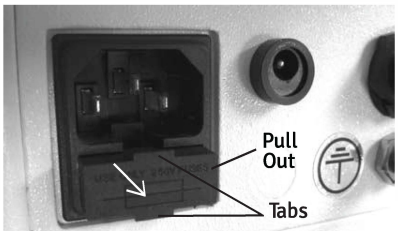


Figura 30. Remoção

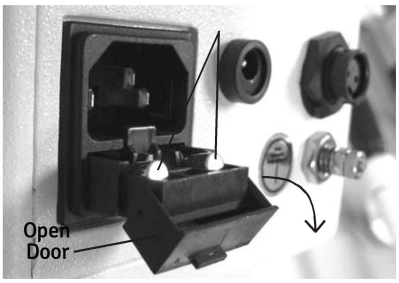


Figura 31. Abertura da tampa do porta-fusível

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A tabela a seguir lista alguns problemas comuns da lâmpada de fenda eVO 350 e as medidas que você pode tomar para corrigi-los. Se os problemas persistirem, entre em contato com a LABOMED conforme indicado na seção Introdução deste manual.


Tabela de erros comuns

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
A lâmpada não acende.	Alimentação de entrada incorreta para a lâmpada de fenda eVO 350.	Verifique se a tomada fornece a alimentação correta.
	Cabo de alimentação defeituoso.	Substitua o cabo de alimentação.
	Fonte de alimentação defeituosa.	Substitua a fonte de alimentação.
A lâmpada não se move.	Batente de borracha sob o joystick.	Retire o batente de borracha.
	Parafuso de trava da base apertado.	Afrouxe o parafuso de trava da base.
Movimento irregular da base.	Batente de borracha sob o joystick.	Retire o batente de borracha.
	Rolamentos podem estar danificados.	Substitua a base.
	O eixo pode estar danificado.	Substitua a base.
A luz de fixação não acende.	Chicote da luz de fixação desconectado da fonte.	Conecte bem o chicote da luz de fixação à fonte.
	Fonte de alimentação defeituosa.	Substitua a fonte de alimentação.
Fenda dupla visível no microscópio.	Microscópio não focado na haste de foco antes do uso.	Instale a haste de foco e verifique se o microscópio está focado nela.

A lista de verificação a seguir apresenta os itens a avaliar para determinar se a lâmpada de fenda eVO 350 precisa de assistência técnica.

- Verifique o exterior da lâmpada de fenda quanto a danos ou componentes faltantes.
- Inspecione o cabo de alimentação quanto a danos.
- Teste a lâmpada levando a luz até o ajuste mais forte e depois até o ajuste mais fraco.
- Verifique se todos os interruptores funcionam corretamente.
- Verifique os filtros passando por todas as opções.
- Verifique a roda de fendas passando por todas as opções.
- Verifique o movimento da base.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

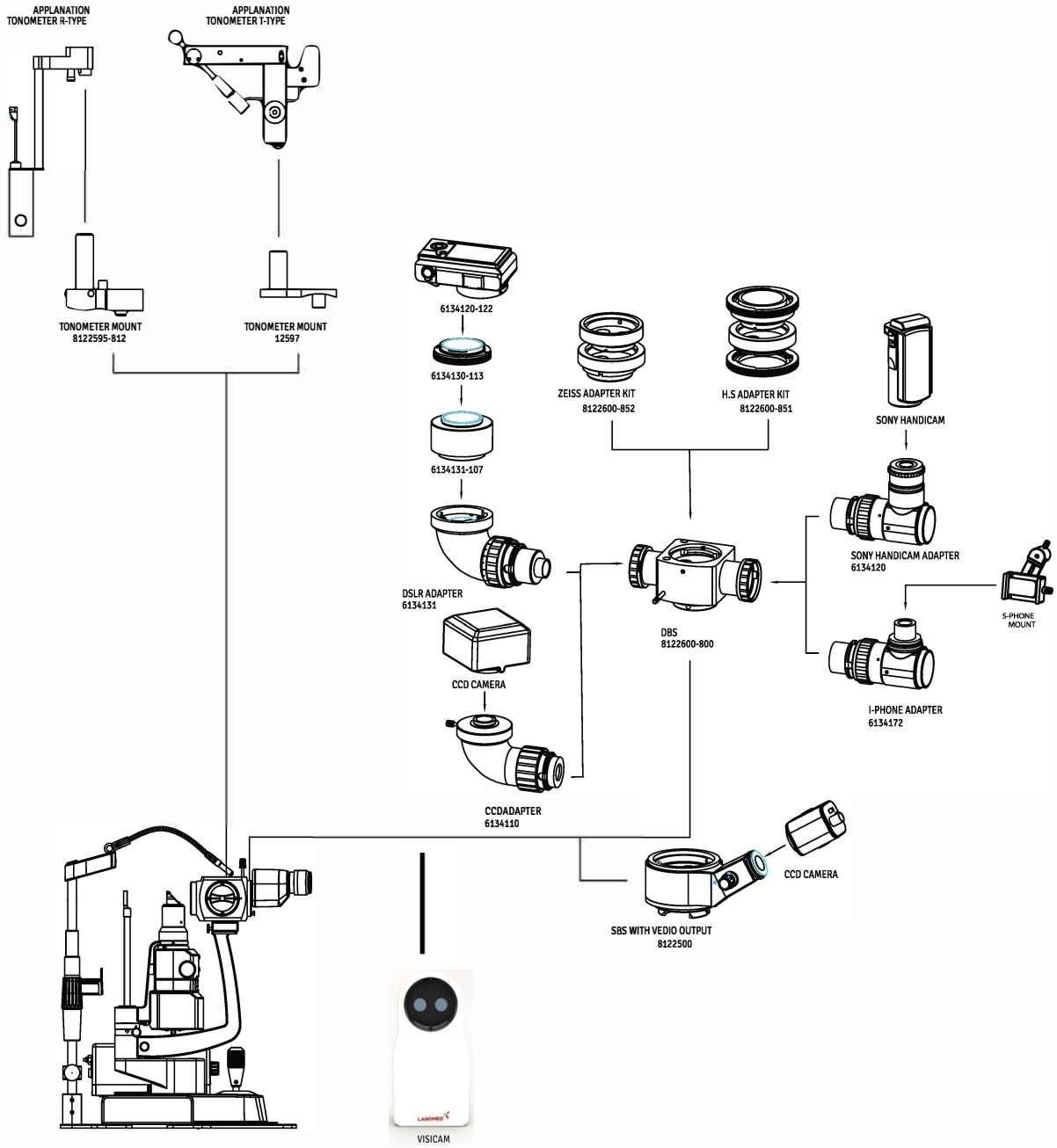

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo 8126300-795

Dimensões físicas

Tamanho:
- Altura: 19,8 pol. (50,2 cm)
- Largura: 10,5 pol. (26,7 cm)
- Profundidade: 14,0 pol. (35,6 cm)

Peso sem embalagem: 23,0 lb (10,4 kg)
Peso com embalagem: 52 lb (23,64 kg)


Elétricas

- Tensão: 100-240 V CA
- Potência de entrada: máx. 50-75 VA
- Frequência: 50/60 Hz
- Fusíveis: T 2,5 AH 250 V
- LED 5 W

Condições de operação

Ambientais


As condições ambientais são as seguintes:

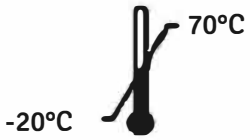

Em operação:

Temperatura: 10 °C (50 °F) a 35 °C (95 °F)

Umidade relativa: 30% a 75%

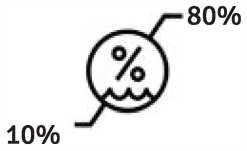


Pressão atmosférica: 80 kPa (23,6 pol. Hg) a 106 kPa (31,3 pol. Hg)

Transporte e armazenamento:

Temperatura: -20 °C (-4 °F) a +70 °C (158 °F).

kPa Umidade relativa: 10% a 80% (sem condensação)

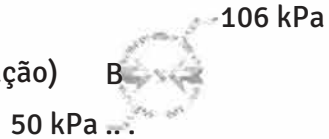

Pressão atmosférica: 50 kPa (14,8 pol. Hg) a 106 kPa (31,3 pol. Hg)

A exposição a estas temperaturas extremas não deve exceder 15 semanas.

Óptica

Microscópio	Galileano
Troca de aumento	Tambor rotativo de 5 passos
Ocular	12,5X
Aumentos	6,5X; 10X; 16X; 25X; 40X
Campo de visão (mm)	37,0; 24,0; 15,0; 9,5; 6,0
Faixa de DIP	49-78 mm
Ajuste dióptrico	±8
Ilum. da fenda	5 W LED
Largura da fenda	0-13,5 mm
Comprimento da fenda	0-13,5 mm
Aberturas da fenda	0,6; 5,8; 9; 13,5 mm e contínuo de 1,5 a 12,0 mm
Rotação da fenda	0°-180°
Filtros	Livre de vermelho, absorvedor de calor, azul cobalto

ESPECIFICAÇÕES (continuação)

FAIXAS DE MOVIMENTO

Longit. (dentro/fora)	100 mm
Lateral (esq./dir.)	107 mm
Vertical (cima/baixo)	30 mm
Curso da mentoneira	80 mm
Dimensões da mesa	18 1/2" x 12 10/16" (465 mm x 316 mm)

DESCARTE

Este produto não gera resíduos perigosos para o meio ambiente. Ao final de sua vida útil, siga as leis e regulamentos locais sobre o descarte adequado deste equipamento.

VERSÃO DE SOFTWARE

Esta unidade não tem software instalado.

TABELAS DE ORIENTAÇÃO

Tabela 201: Orientação e declaração do fabricante

Emissões eletromagnéticas

Todos os equipamentos e sistemas

Orientação e declaração do fabricante: emissões eletromagnéticas

O eVO 350 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do eVO 350 deve garantir que ele seja usado nesse ambiente.

Ensaio de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético Orientação
RF Emissões de CISPR 11	Grupo 1 Classe A	O eVO 350 utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Harmônicos IEC 61000-3-2	Classe A	O eVO 350 é adequado para uso em todos os estabelecimentos, exceto os domésticos e os diretamente conectados à rede pública de baixa tensão que abastece edifícios para fins domésticos.
Flutuações IEC 61000-3-3	Conforme	

Tabela 202: Orientação e declaração do fabricante

Imunidade eletromagnética

Todos os equipamentos e sistemas

Orientação e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética

O eVO 350 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do eVO 350 deve garantir que ele seja usado nesse ambiente.

Ensaio de imunidade	IEC 60601 Nível de ensaio	Conformidade conformidade	Ambiente eletromagnético: orientação
ESD IEC 61000-4-2	±6 kV contato ±8 kV ar	±6 kV contato ±8 kV ar	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem sintéticos, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
EFT IEC 61000-4-4	±2 kV rede ±1 kV E/S	±2 kV rede ±1 kV E/S	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Surto IEC 61000-4-5	±1 kV diferencial ±2 kV comum	±1 kV diferencial ±2 kV comum	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas/interrup. de tensão IEC 61000-4-11	>95% queda 0,5 ciclo 60% queda 5 ciclos 30% queda 25 ciclos >95% queda 5 segundos	>95% queda 0,5 ciclo 60% queda 5 ciclos 30% queda 25 ciclos >95% queda 5 segundos	A qualidade da rede elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do eVO 350 precisar de funcionamento contínuo durante interrupções da rede elétrica, recomenda-se alimentar o eVO 350 por um nobreak (UPS) ou bateria.
Freq. de rede 50/60 Hz Campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos de frequência de rede devem estar nos níveis de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

TABELAS DE ORIENTAÇÃO (continuação)

Tabela 204: Orientação e declaração do fabricante

Imunidade eletromagnética

Equipamentos e sistemas que NÃO são de suporte à vida

Orientação e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética

O eVO 350 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do eVO 350 deve garantir que ele seja usado nesse ambiente.

Ensaio de imunidade	IEC 60601 Nível de ensaio	Conformidade Nível	Ambiente eletromagnético eletromagnético: orientação
RF conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	(V1) = 3 Vrms	Os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis não devem ser usados a uma distância de qualquer parte do eVO 350, incluindo cabos, menor que a distância de separação recomendada calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada: d=(3,5/V1)(Sqrt P) d=(3,5/E1)(Sqrt P) 80 a 800 MHz d=(7/E1)(Sqrt P) 800 MHz a 2,5 GHz Em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) segundo o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo de transmissores de RF fixos, determinadas por levantamento eletromagnético do local, devem ser inferiores ao nível de conformidade de cada faixa de frequência. Pode haver interferência perto de equipamentos com este símbolo: ((ɾ•))
RF irradiada IEC 61000-4-3	80 MHz a 2,5 GHz @ 3 V/m	(E1) = 3 V/m	

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
*As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações rádio base de telefones (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, radioamadores, transmissões de rádio AM e FM e de TV, não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar um levantamento eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida no local de uso do equipamento EM ou sistema EM exceder o nível de conformidade aplicável, o equipamento ou sistema EM deve ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado desempenho anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou reposicionar o equipamento ou sistema EM.
*Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a [V1] V/m.

TABELAS DE ORIENTAÇÃO (continuação)

Tabela 206: Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e o eVO 350 para equipamentos EM e sistemas EM que NÃO são de suporte à vida.

Orientação e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e o eVO 350

O eVO 350 destina-se ao uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou usuário do eVO 350 pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) e o eVO 350, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência máx. do transmissor (W)	Separação (m) 150 kHz a 80 MHz d=(3,5/V1)(Sqrt P)	Separação (m) 80 a 800 MHz d=(3,5/E1)(Sqrt P)	Separação (m) 800 MHz a 2,5 GHz d=(7/E1)(Sqrt P)
0,01	0,1166	0,1166	0,2333
0,1	0,3689	0,3689	0,7378
1	1,1666	1,1666	2,3333
10	3,6893	3,6893	7,3786
100	11,6666	11,6666	23,3333

Para transmissores com potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada (d) em metros (m) pode ser estimada pela equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) segundo o seu fabricante.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação da faixa de frequência mais alta.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

GARANTIA

Este produto é garantido pela Labo America, Inc. contra defeitos de material e de fabricação, em condições normais de uso, por um período de um ano a partir da data da fatura ao comprador original. (Um revendedor autorizado não é considerado comprador original.) Nos termos desta garantia, a única obrigação da Labo America, Inc. é reparar ou substituir a peça ou o produto defeituoso, a critério da Labotech/LABOMED.

Esta garantia aplica-se a produtos novos e não a produtos violados, alterados de qualquer forma, mal utilizados, danificados por acidente ou negligência, ou cujo número de série tenha sido removido, alterado ou apagado. Também não se aplica a produtos instalados ou operados em desacordo com o manual de instruções LABOMED aplicável, nem a produtos vendidos, revisados, instalados ou reparados por terceiros que não uma fábrica da Labo America, Inc. ou um revendedor autorizado LABOMED.

Lâmpadas, tabelas, cartões e demais itens consumíveis não são cobertos por esta garantia.

Todas as reclamações nos termos desta garantia devem ser feitas por escrito à fábrica LABOMED ou ao revendedor autorizado que realizou a venda original, acompanhadas de uma cópia da fatura do comprador.

Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Fica excluída toda garantia implícita de comercialização ou de adequação a uma finalidade específica. Nenhum representante ou outra pessoa está autorizado a assumir outras obrigações relativas a um produto LABOMED. A Labotech/LABOMED não será responsável por danos especiais, incidentais ou consequenciais decorrentes de negligência, violação de garantia, responsabilidade objetiva ou quaisquer outros danos resultantes do projeto, da fabricação, da venda, do uso ou do manuseio do produto, ou a eles relacionados.

GARANTIA DE PATENTE

Se notificada prontamente por escrito de qualquer ação movida contra o comprador com base na alegação de que o instrumento viola uma patente dos EUA, a Labo America, Inc. defenderá essa ação às suas custas e pagará as custas e indenizações concedidas em tal ação, desde que a Labo America, Inc. tenha o controle exclusivo da defesa, com informações e assistência (às custas da Labo America, Inc.) para essa defesa, e de todas as negociações para acordo e transação.

ALTERAÇÕES DO PRODUTO

A Labo America, Inc. reserva-se o direito de fazer alterações no projeto ou de fazer acréscimos ou melhorias em seus produtos sem a obrigação de incorporá-los a produtos fabricados anteriormente.

RECLAMAÇÕES POR FALTA

Tomamos o máximo cuidado na seleção, verificação, reverificação e embalagem para eliminar a possibilidade de erros. Se for constatado algum erro de remessa:

1. Examine cuidadosamente o material de embalagem para garantir que nada tenha passado despercebido ao desembalar a unidade.
2. Ligue para o revendedor de quem comprou o produto e informe a falta. Os materiais são embalados na fábrica e nada deve faltar se a caixa nunca tiver sido aberta.
3. As reclamações devem ser apresentadas em até 30 dias após a compra.

RECLAMAÇÕES POR DANOS NO TRANSPORTE

Nossa responsabilidade pela remessa termina com a entrega segura e em bom estado à transportadora. Reclamações por perda ou danos no transporte devem ser feitas prontamente e diretamente à transportadora. Se, na entrega, o exterior da embalagem apresentar sinais de manuseio brusco ou danos, peça ao agente da transportadora que anote “Recebido em mau estado” no comprovante de entrega. Se, em até **48** horas após a entrega, forem encontrados danos ocultos ao desembalar e não houver sinais externos de manuseio brusco, peça à transportadora um relatório de “Mau estado”. Este procedimento é necessário para que o revendedor mantenha o direito de ressarcimento junto à transportadora.

Revision History

Rev. No.	Date of Release	DCR #	Change	App. By
1.0	fev. 2026			S Bal

LABOMED
ideas for vision

Fabricante: Labotech Microscopes India Pvt. Ltd.
Vendas e distribuição:

Labo America Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA
94538
U.S.A.

Phone: 510-445-1257
Email:
sales@laboamerica.com
www.laboamerica.com

EC REP

Labomed Europe b.v
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
The Netherlands
Tel: +31 (0)10 4584222
E-mail: info@labomedeurope.com
www.labomedeurope.com

CE

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

A28240 ISO 9001
LABOTRONTNSTRUMENTS INDIA Pvt Ltd